


dental
well
ness
profes
sionals



World Work
DENTISTRY DEDICATED

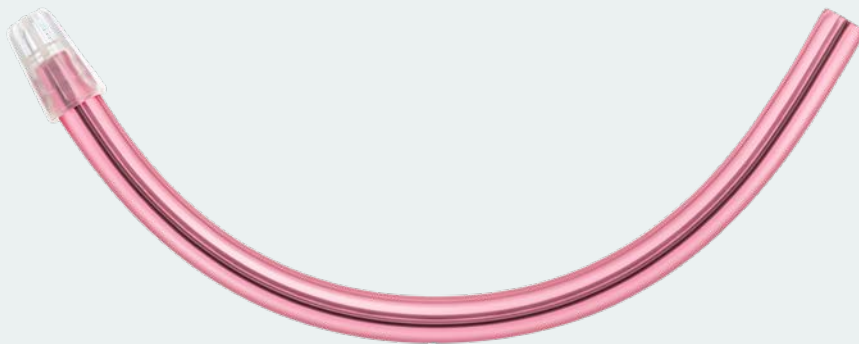

World Work
DENTISTRY DEDICATED

A medium scale set-up with **great flexibility**.

World Work is specialised in the production and marketing of the latest generation dental amalgam and disposable saliva ejectors. It stands as a highly respected reference for professionals in the sector.

Impeccable quality and care for the product, combined with the research and development of a flexible management system and direct

control of the entire production cycle, allow the company to guarantee customers a continuous, highly professional support.

World Work adamantly centres on work excellence: a courageous yet feasible goal, as demonstrated by the growing standing of its products in every corner of the world.

Premium product quality, highly flexible service, constant customer support:
this is the World Work's daily mission.



Medie dimensioni, **grande flessibilità.**

Massima qualità del prodotto, servizio flessibile, affiancamento costante al cliente:
questa la mission quotidiana di World Work.

Specializzata nella produzione e commercializzazione di amalgama dentale di ultima generazione e aspirasaliva monouso, World Work è punto di riferimento privilegiato per i professionisti del settore.

La massima qualità e la cura del prodotto, unite alla ricerca e allo sviluppo di un sistema di gestione flessibile e al controllo diretto dell'intero ciclo

produttivo, permettono all'azienda di garantire al cliente un affiancamento continuo e altamente professionale.

World Work punta in modo deciso all'eccellenza operativa: un obiettivo coraggioso ma raggiungibile, come dimostra il crescente apprezzamento dei suoi prodotti in ogni parte del mondo.

Experience, innovation and **quality**

The outright quality of World Work products is the result of progressive development and fine-tuning of production technology and the research, strictly in-house, of new materials and application solutions capable of guaranteeing complete direct control of production processes.

Quality System Certifications

The World Work Quality Management System is certified to **ISO 9001:2015** and **ISO 13485:2016**.

Product Certifications

All products manufactured by World Work are CE type tested in conformity to Annex VII and Annex V of EC directive 93/42 and later amendments.

Direct line with customer.

World Work offers daily support to the customer, who can count on a constant and professional support, quick answer times and full responses, and on comprehensive assistance in product promotion and management. A flexible approach that also allows customer specific requirements to be satisfied.



*Esperienza, innovazione e **qualità***

La qualità assoluta dei prodotti World Work è il frutto del progressivo sviluppo e perfezionamento delle tecnologie di produzione, e della ricerca, rigorosamente interna, di nuovi materiali e soluzioni applicative in grado di garantire il controllo completo e diretto dei processi di fabbricazione.

Certificazioni di sistema

Il Sistema di Gestione per la Qualità di World Work è certificato **ISO 9001:2015** e **ISO 13485:2016**.

Certificazioni di prodotto

Tutti i prodotti fabbricati da World Work sono omologati CE in conformità all'Allegato VII e all'Allegato V della direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni.

Filo diretto con il cliente

World Work affianca quotidianamente il cliente, che può contare su un supporto costante e professionale, su risposte rapide ed esaurienti, e su un'assistenza completa nelle fasi di promozione e gestione dei prodotti. Un approccio flessibile, che consente inoltre di soddisfare richieste personalizzate e specifiche.

**saliva ejectors
aspirasaliva**

Maximum
safety,
and great
comfort

The filter insert, completely rounded, without sharp points and edges, ensures maximum delicacy and can even be used on sore gums.

The tip is attached in total safety and allows an air flow avoiding saliva suction even in the event of blockage, preventing any pain or irritation for the patient.

Top quality and safety

The saliva ejectors are made of certified medical atoxic plastic, according to the latest edition of the European Pharmacopeia.

Always in shape

World Work saliva ejectors are characterised by their high flexibility and total lack of bottlenecks, guaranteeing a high filtration capacity.

Massima
sicurezza,
grande
comfort.

L'inserto filtrante, completamente arrotondato, senza asperità e senza angoli, garantisce la massima delicatezza e può essere utilizzato anche per interventi su mucose irritate.

La parte filtrante è completamente sicura: consente il passaggio d'aria evitando il risucchio delle mucose anche nel caso di ostruzione e previene dolore o fastidio al paziente.

Qualità e sicurezza al top

Le cannule sono realizzate in materiale plastico atossico medicale certificato, secondo le direttive della Farmacopea Europea ultima edizione.

Sempre in forma

Gli aspirasaliva World Work si caratterizzano per l'elevato grado di flessibilità e sicurezza, e la totale assenza di strozzatura.

Technical characteristics

- Length from 130 to 150 mm
- Clear or coloured
- Fixed or removable tip
- Zinc or copper coated metal wire
- 100 or 250 pcs bag
- 5000 or 1000 pcs boxe

Caratteristiche tecniche

- Lunghezza da 130 mm a 150 mm
- Trasparenti o colorate
- Inserto filtrante fisso o amovibile
- Filo metallico zincato o ramato
- Sacchetti da 100 o 250 pezzi
- cartoni da 5000 o 1000 pezzi



Plasticity,
resistance,
precision

dental amalgam, self-activating capsules

amalgama dentale, capsule autoattivanti

Advanced research in developing the alloy for World Work amalgam offers a high copper content and zinc free product.

It is in line with ISO 24234:2004 standards and implements the best preparation techniques and guarantees optimum performance.

The right mixture with Ag-Cu eutectic highlights a first class product in the preparation for NG2 amalgams. The micro-particle size of mixed irregular atomized and slaked blend, and the uniformity of the ratio in the metals, favour incomparable plasticity in its application.

The optimum alloy and mercury ratio guarantees maximum corrosion and crack resistance, in addition to maintaining perfect edges.



Plasticità,
resistenza,
precisione

Frutto di avanzate ricerche, la lega per amalgama World Work è ad elevato tenore di rame e priva di zinco.

In linea con la normativa ISO 24234:2004, si avvale delle migliori tecniche di preparazione e garantisce prestazioni ottimali.

La giusta miscelazione con l'eutettico Ag-Cu evidenzia un prodotto di prim'ordine nei prepa-

rati per amalgami NG2. La microgranulometria di particelle miste, atomizzate irregolari e a scaglie, e l'omogeneità dei rapporti tra i metalli utilizzati, favoriscono un'impareggiabile plasticità nella lavorazione.

Il rapporto ottimale tra lega e mercurio garantisce invece la massima resistenza alla corrosione e alle fratture, oltre a mantenere margini perfetti.

Alloy in powder

Powder alloy especially developed for use in mixers. 250g packet.

Self-activating capsules

1, 2 and 3 dose capsules produced by a fully computerised method. 50 or 100 pcs packet.

Legha in polvere

Legha sfusa studiata appositamente per l'utilizzo nei miscelatori. Confezioni da gr. 250.

Capsule autoattivanti

Capsule da 1, 2, 3 dosi prodotte con metodo di dosaggio interamente computerizzato. Confezioni da 50 o 100 unità.



worldwork.it

studiobrand.it - 10-2020



World Work Srl

Via del Progresso, 47 - 36054 Montebello Vic.no (VI) - Italy
Tel. +39 0444 574297 - Fax. +39 0444 370543